



durchgehende Seitengitter bei Pflegebetten



per Knopfdruck lassen sich die integrierten Seitengitter aus der Führungsschiene leicht entnehmen.



längere Seitengitter können somit schnell problemlos und ohne Werkzeug ausgewechselt und angebracht werden.

Nun lassen sich die geteilten Seitengitter leicht umstecken (austauschen)
s. auch VIDEO auf unserer Homepage unter „Pflegebetten – geteilte Seitengitter“

auf beiden Seiten leicht umzustecken






Serviceberatung für Senioren- und Pflegeeinrichtungen
Hans-Joachim Ofschonka – Luisenstraße 39 – 59514 Welper
Tel. 02384 / 2693 Fax: 02384 / 911 098 / www.ssp-serviceberatung.de
USt-IdNr.: DE236747409



NEU!

**geteilte Seitengitter, abschwenkbar
an fast allen Modellen nachzurüsten**

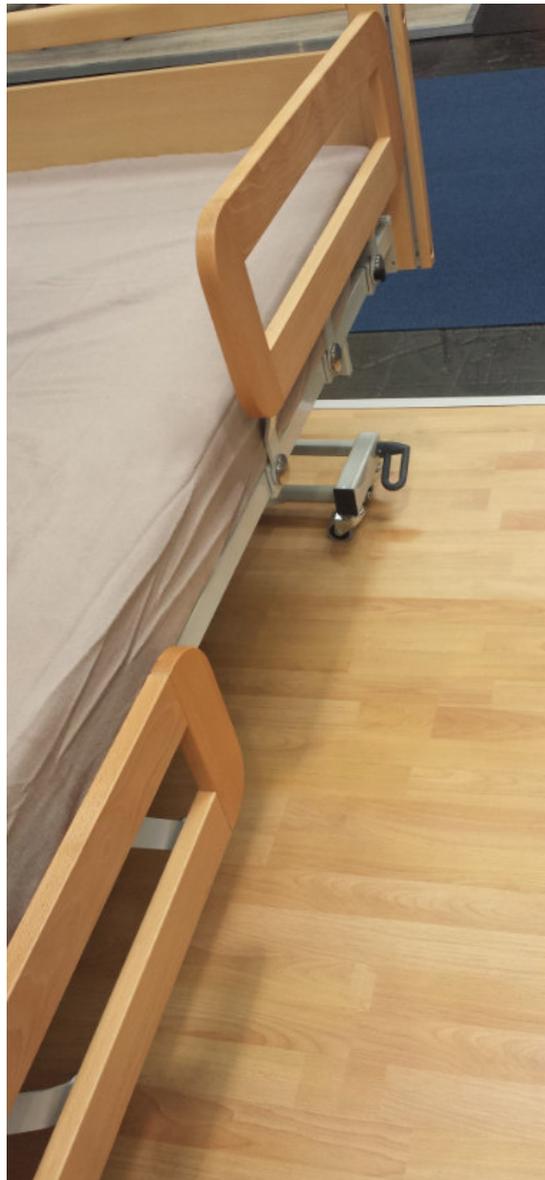

Seitengitter können schnell auf beiden Seiten gewechselt werden

Als Video zu sehen auf unserer Homepage

www.ssp-news.de

Rubrik: Pflegebetten – geteilte Seitengitter



Wird mit einer stabilen Klemme am Rahmen befestigt.

Zugschnäpper – zur leichten Entriegelung



Serviceberatung für Senioren- und Pflegeeinrichtungen
Hans-Joachim Ofschonka – Luisenstraße 39 – 59514 Welver
Tel. 02384 / 2693 Fax: 02384 / 911 098 / www.ssp-serviceberatung.de
USt-IdNr.: DE236747409



Seite





NEU!

Variantenvielfalt

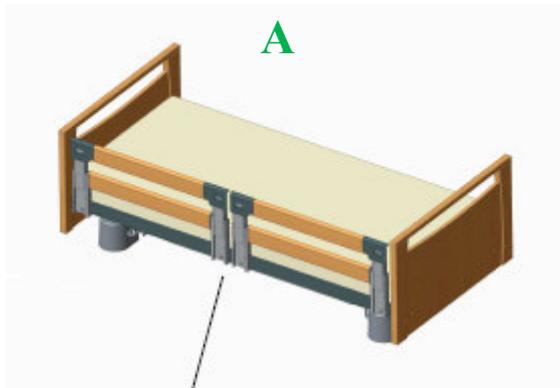


Abb. zeigt 1/2 - 1/2 - Lösung
 (die geteilten Seitenteile
 sind gleichlang)

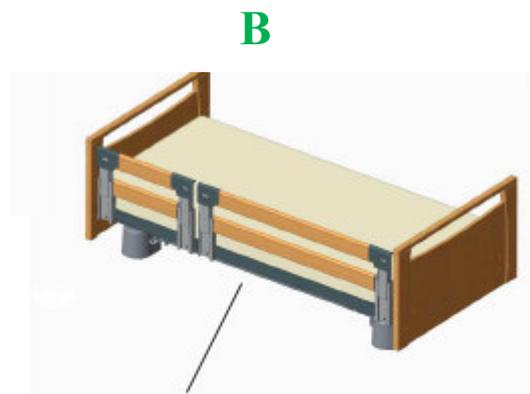


Abb. zeigt 1/3 - 2/3 - Lösung
 (die geteilten Seitenteile
 sind unterschiedlich lang)


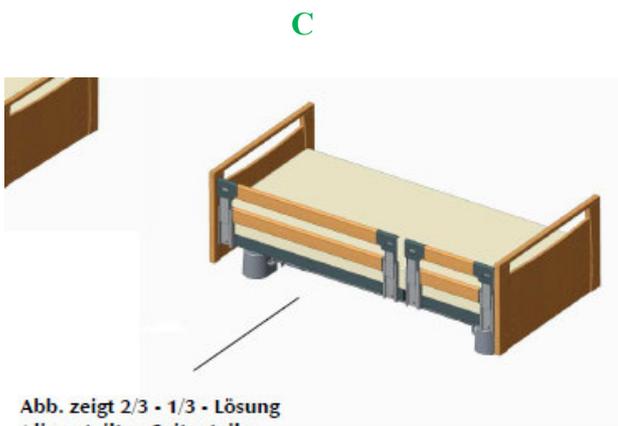


Abb. zeigt 2/3 - 1/3 - Lösung
 (die geteilten Seitenteile
 sind unterschiedlich lang)



Ausstieg fusseitig frei=>
ca. 330 mm
 (keine FEM!!!!!!)

Abb. zeigt 1/3 - 1/2 - frei Lösung
 (die geteilten Seitenteile
 sind unterschiedlich lang)

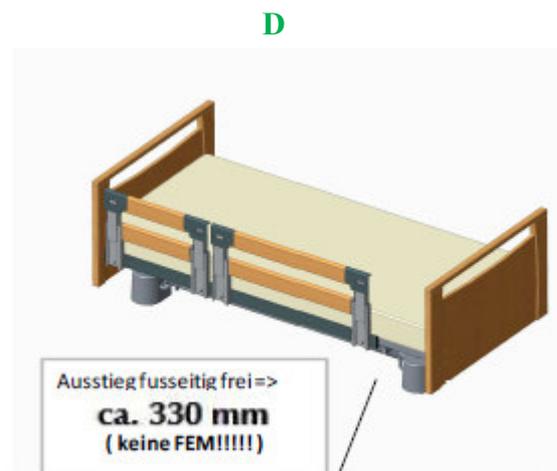

E

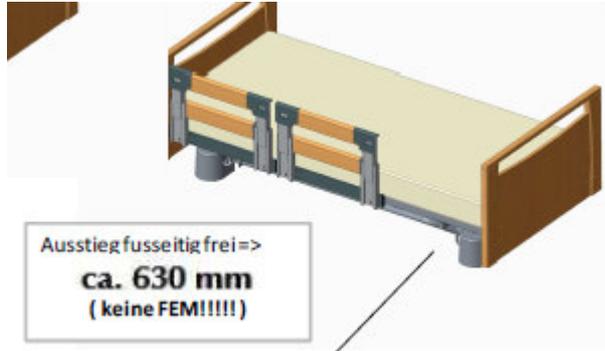


Abb. zeigt 1/3 - 1/3 - frei Lösung
(die geteilten Seitenteile
sind gleich lang)

F

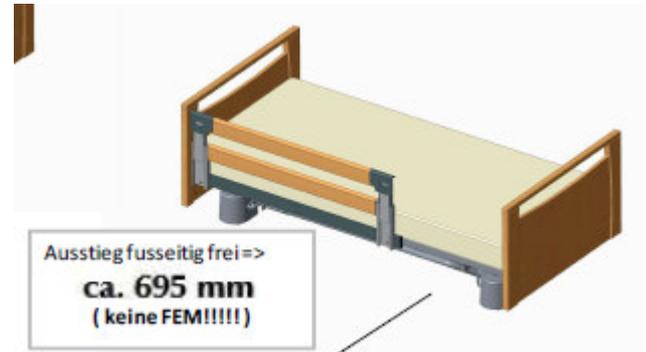


Abb. zeigt 2/3 - frei Lösung
(es wird nur ein geteiltes
Seitenelement eingesetzt,
welches länger als 50 % der
Liegeflächenlänge ist)

Der Abstand zwischen Seitengitter

und Kopfteil muss kleiner als 60 mm sein.

:

Der Abstand zwischen den Seitengittern muss entweder kleiner als 60 mm oder größer als 318 mm sein. Dieses Maß wird bei flacher Position der Liegefläche gemessen.

:

Die Abstände innerhalb der Seitengitter müssen kleiner als 120 mm sein.

:

Das Spaltmaß zwischen Fußteil und Seitengitter muss entweder kleiner als 60 mm oder größer als 318 mm sein – auch bei vollständig ausgezogener Bettverlängerung.